



タニケットタッチ

タッチスクリーンテクノロジー搭載の次世代タニケット

||| 最高レベルの品質、「メイド・イン・ジャーマニー」



指先で 触れる 未来

VBM は、タニケツタッチの開発により、品質・信頼性・安全性・簡便性を兼ね備えた最新のタニケツ（止血器）を作り、新たな金字塔を打ち立てました。

最適な精度と高い性能で、手術室での外科手術または外来手術の際に、最大級の安全な環境を実現します。大きな 8 インチのタッチスクリーンに、圧力と加圧時間についての情報がはっきり表示されます。簡易選択ボタンや固有アラームプログラムなどのユーザーフレンドリーな革新的機能によって、装置を簡単に使えるようになり、患者の安全性が向上します。長期にわたって電力供給が停止した場合も、強力なリチウムイオンバッテリーで問題なく対処できるため、手術を安全に続けることができます。

耐久性にきわめて優れたケースで、装置表面は損傷を受けにくいいため、洗浄と消毒も容易です。

タニケツタッチは、VBM 製のすべてのカフに対応しています。

タニケツタッチ TT20 (カフチャンネル 2 個)



主な仕様

タッチスクリーン

- 全面強化ガラス
- 洗浄と消毒が容易
- 手術用手袋で操作可能

ディスプレイ

- 8 インチ (800×480ピクセル)
- 広い視野角 (178 度)
- 低反射、非光沢、ノングレア

バッテリー

- リチウムイオン (14.4 V-93.6 Wh)
- バックアップ時間は約 8 時間

電源電圧

- 100 ~ 240 VAC

重量および寸法

- 4.5 kg
- 高さ 186 mm | 幅 263 mm
奥行き 226 mm

TT20 の特長



併用可能なカフ

- シングルカフ
- ダブルカフ (IVRA)
- シングルカフ 2 個 (両側手術)



ケース



- 一体型の取っ手付
- 耐久性にきわめて優れた材質
- UV 耐性
- 洗浄と消毒が容易な表面

USB ポート

- ソフトウェア更新
- 装置分析のためのログファイル保存


圧力 | 時間の範囲

- 圧力の範囲：
80 ~ 500 mmHg
- 時間の範囲
15 分 ~ 2 時間

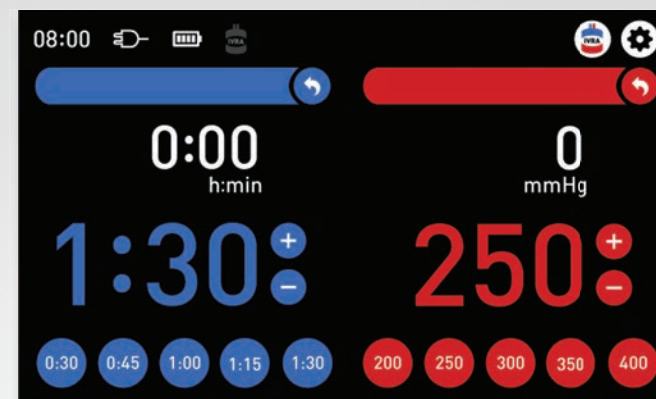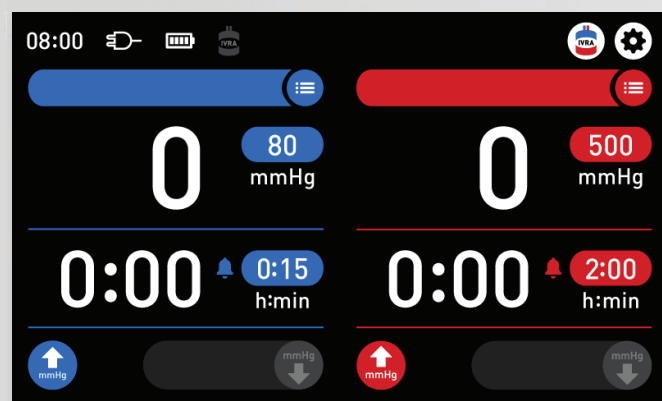

簡易選択ボタン


- わずか 2 回のタッチで、圧力や時間を設定済みの値へ変更可能
- 矢印ボタンや確認ボタンのタッチは不要
- 手術中に圧力をすぐに変更する必要がある場合に、患者の安全を最大限に確保するための機能

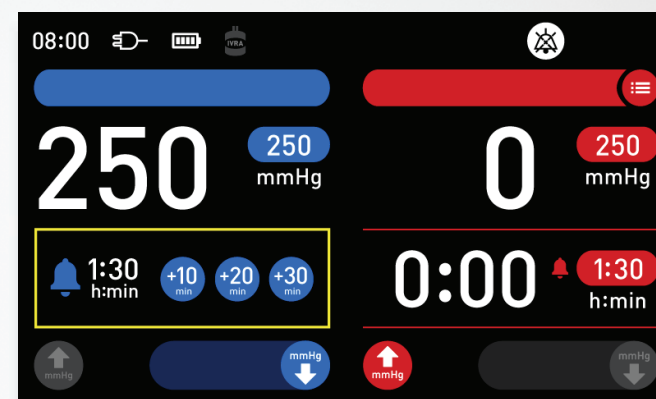

タイマーアラーム


手術時間の正確なモニタリング

- 設定したアラーム時間になるとユーザーに通知
- 加圧経過時間超過時に延長可能 (10 分、20 分、30 分単位)

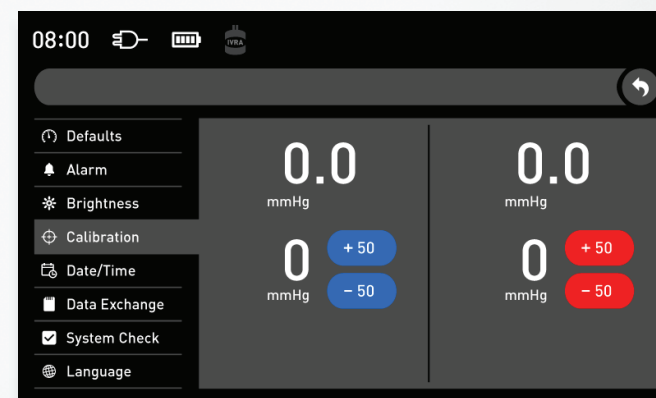

設定

- 時間および圧力のプリセット値をカスタマイズ可能
- タッチスクリーンの表示機能へのアクセスが容易
- 臨床工学技士によるメンテナンス (校正、セルフテスト、リークテスト) が容易
- 14 言語対応

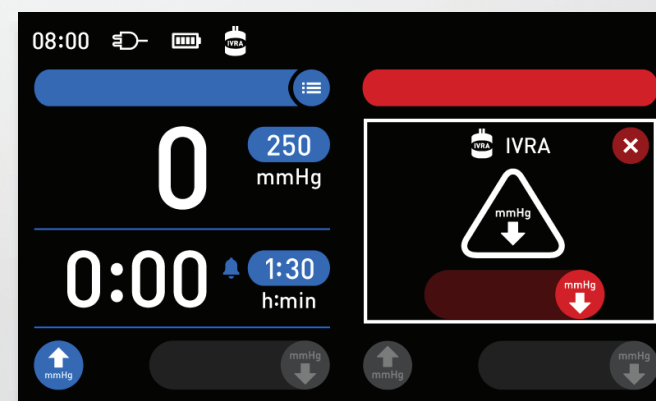

IVRA (経静脈局所麻酔)

安全機構

- カフの排気が誤って行われないように危険性を低減
- IVRA の急激な低下の危険性を回避



※延長チューブはSiricon connecting tubingへ変更となります。

TT20 の付属品/オプション品

接続用チューブ



カフチャンネルとの接続用

- 接続用チューブ (青/赤)、長さ 4.5 m

4.5 m

モバイルスタンド (バスケット付)



- 耐荷重 2kg のバスケット 1 個付
- ロック機構付のキャスター 4 個 (ESD 2 個を含む)

寸法

- 高さ 939 mm | 幅 400 mm | 奥行き 400 mm

重量

- 8.2 kg

バスケット



寸法

- 高さ 185 mm | 幅 377 mm | 奥行き 196 mm

重量

- 0.73 kg



製造販売業者



CBC GROUP

CBC株式会社

〒104-0052
東京都中央区月島2-15-13
TEL:03-3536-4823
FAX:03-3536-4743

販売業者



Star Product

スター・プロダクト株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24
TEL:03-3812-6005 (代表) FAX:03-3812-6006